







# Instrukcja pobrania i przesłania materiału do badania - surowica krwi

## Pobranie materiału:

W celu ułatwienia pobrania materiału do badania Instytut Mikroekologii przygotował film instruktażowy pod adresem: <https://instytut-mikroekologii.pl/jak-pobrac-material/>

1. Pobrać krew żylną ze zgięcia łokciowego za pomocą dołączonego zestawu – probówki do badań biochemicznych („na skrzep”), np. Monovette serum 5,5 ml oraz igły np. Monovette 21Gx1/2 Nr 2 (rys. 1).
2. Po pobraniu próbkę krwi pozostawić przynajmniej 15 min w celu skrzepnięcia (rys. 2), a następnie odwirować (5 min, 3000 obrotów). W przypadku braku wirówki, próbkę krwi należy odstawić na 3 godziny w lodówce (rys. 3).
3. Za pomocą dołączonej pipety przenieść surowicę do dołączonej probówki z korkiem. **Minimalna objętość surowicy** wymagana do jednego badania laboratoryjnego to **0,5 ml** (rys 4. i rys. 5).
4. Opisaną imieniem i nazwiskiem probówkę wraz z surowicą włożyć do plastikowego worka i szczelnie zakleić (rys 6.). Całość umieścić w kartonowym opakowaniu.
5. **Maksymalny czas** dostarczenia materiału do badania od momentu pobrania wynosi **7 dni**.

Do czasu wysyłki materiał należy przechowywać w lodówce (2-8°C). W przypadku dłuższego przechowywania, próbkę należy zamrozić w -20°C i w takim stanie dostarczyć do Instytutu Mikroekologii.

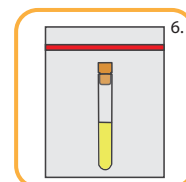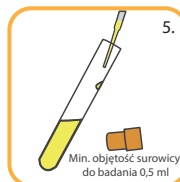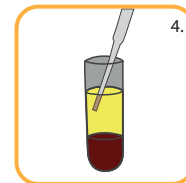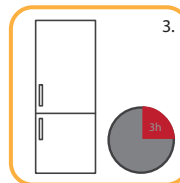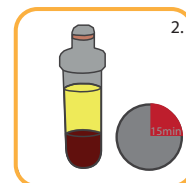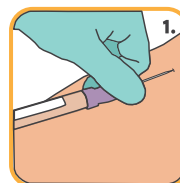

## Przesłanie materiału:

- Próbkę pobranego materiału należy umieścić w kartonie i przesłać na adres:  
**Instytut Mikroekologii**  
**ul. Sielska 6**  
**60-129 Poznań**  
Materiał do badania należy wysłać na początku tygodnia (poniedziałek-środa).  
**Uwagi:** W przypadku temperatury powietrza powyżej +25°C proszę zabezpieczyć materiał wkładem chłodzącym.
- Do przesyłki należy dołączyć dokładnie wypełnione zlecenie na badanie (ważna data pobrania). Zlecenie może być wypełnione zarówno przez lekarza, jak i pacjenta. Do przesyłki należy dołączyć dowód wpłaty za badania.
- Wpłatę należy dokonać na następujący numer konta: Santander Bank Polska S.A. 44 1500 1054 1210 5006 7879 0000. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty, badania zostaną wstrzymane do momentu uiszczenia przez pacjenta należnej kwoty.

Dodatkowe koszty związane ze zrealizowaniem badania:

- 15 zł - wysyłka wydrukowanego wyniku na adres Pacjenta
- 120 zł - pełen pakiet - w tym: odbiór próbki materiału do badań przez kuriera DHL Medical\* i przesłanie jej na adres Instytutu Mikroekologii w Poznaniu oraz wysyłka wydrukowanego wyniku na podany przez Pacjenta adres.

\* Instrukcja postępowania przy wykupieniu opcji wysyłki próbki kurierem DHL Medical:

- wypełnij wniosek dołączony do przesłanego opakowania,
- wypełniony wniosek odeślij na adres md.pl@dhl.com (obsługiwany od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17).
- w odpowiedzi otrzymasz maila z informacją o numerze zlecenia oraz terminie realizacji odbioru przesyłki.
- wypełnij także list przewozowy dołączony do zamówionych opakowań (dane nadawcy).

**UWAGA:** sprawdź czy już nie dokonałeś opłaty za powyższe usługi na wcześniejszym etapie zamówienia.