

PROSZĘ WYPEŁNIĆ ZLECENIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Dane pacjenta

Nazwisko:

Imię:

Data urodzenia:

PESEL:

(w przypadku braku PESEL - seria i numer oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Płeć: M K Telefon:

Adres zamieszkania:

Ulica i numer domu/mieszkania

Kod pocztowy i miejscowość

Dane rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)*

Nazwisko 1: Imię 1:

Adres zamieszkania 1:

Nazwisko 2: Imię 2:

Adres zamieszkania 2:

*- pola obowiązkowe

Podpis (i pieczęć) zleceniodawcy

Zlecam wykonanie badania

WYMAGANA data i godzina pobrania materiału:

Podpis osoby pobierającej materiał

Mikrobiota pochwy Screen (posiew + biocenoza + pH)

Panel urogenitalny 7 patogenów metodą PCR*

*- badanie wykonywane przy współpracy z podwykonawcą. Lista https://instytut-mikroekologii.pl/lista

Istotne dane kliniczne

- cięża, tydzień
menopauza
antykoncepcja hormonalna
leczenie andrologiczne
inne

Dolegliwości:

- swędzenie
pieczenie
rybi zapach
upławy
zaczerwienienie

Proszę zaznaczyć zmierzoną wartość pH:

3,6	4,1	4,4	4,7	5,0	5,3	5,6	6,1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Numer badania

Dokument sprzedaży

- paragon
faktura

Dane do faktury:

Firma/Imię i nazwisko

NIP

Ulica i nr domu/mieszkania

Kod pocztowy i miejscowość

Forma płatności

- gotówka
karta
przelew
PayU

Nr zamówienia e-sklep:

Odbiór wyniku

wersja elektroniczna na adres e-mail (0 zł):

W celu wysyłki wyniku mailem wymagany uzupełniony PESEL.

wersja elektroniczna dla lekarza/ innego specjalisty na adres e-mail (0 zł):

wysyłka pocztą (dodatkowo płatna - 15 zł)

osobisty (0 zł)

przez upoważnioną osobę (0 zł)

Imię i nazwisko

Seria i numer dowodu osobistego

Poniższą część wypełnia Instytut Mikroekologii

Rodzaj materiału:

wymaz z pochwy/szyjki macicy

Sposób dostarczenia:

- osobiście
pocztą/kurier

Data i godzina przyjęcia materiału:

Uwagi laboratorium:



Instytut Mikroekologii
Wrażliwi na Twoje wnętrze

ul. Sielska 10, 60-129 Poznań ■ tel.: 61 862 63 15 ■ tel. kom.: 538 325 843
biuro@instytut-mikroekologii.pl ■ laboratorium@instytut-mikroekologii.pl

www.instytut-mikroekologii.pl
Instagram Facebook

Wymagania ustawowe związane z wykonywaniem badań oraz klauzula RODO znajdują się na stronie: <https://instytut-mikroekologii.pl/przetwarzanie-danych-pacjenci/>

Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacjami dotyczącymi zleconych badań oraz otrzymałam/-em satysfakcjonujące mnie odpowiedzi na zadane pytania i wyrażam dobrowolnie zgodę na udział w tym badaniu.

WYMAGANY podpis osoby zlecającej badanie. Brak podpisu będzie skutkował niewykonaniem zleconych badań.

Miejscowość, data

Czytelny podpis

Data i godzina pobrania materiału

Dodatkowe zgody

- ☐ Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich wyników **do celów naukowych, z zachowaniem warunków anonimowości.**

Miejscowość, data

Czytelny podpis

- ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Mikroekologii Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sielskiej 10, w celu przekazywania informacji handlowych i marketingowych.

Zapoznałam/-em się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usnięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej przekazywania informacji handlowych i marketingowych.

Adres e-mail

Miejscowość, data

Czytelny podpis



INSTRUKCJA POBRANIA I PRZESŁANIA MATERIAŁU DO BADANIA – MIKROBIOTA POCHWY

Pobranie materiału

UWAGA: wymaz należy pobrać między 10 a 14 dniem cyklu. Po menopauzie, przed pokwitaniem lub w przypadku zlecenia tylko wymazu do badania "Panel urogenitalny 7 patogenów metodą PCR", dzień pobrania nie ma znaczenia.

PRZYGOTOWANIE I PRZECIWWSKAZANIA DO POBRANIA WYMAZU:

Materiał do badania, powinien być pobierany wyłącznie przez lekarza (np. ginekologa) lub inną osobę wykwalifikowaną (np. położną), w pierwszej kolejności przed wykonaniem badania lub USG ginekologicznego na dedykowany zestaw pobraniowy dostępny w Instytucie Mikrobiologii.


Przez okres 48 godzin przed pobraniem należy: zrezygnować ze współżycia płciowego, ograniczyć zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne do podmywania delikatnym płynem myjącym lub wodą podczas toalety całego ciała, nie stosować یرgacji dopochwowych, nie stosować żadnych leków dopochwowo (globulek, tabletek, czopków, maści) lub maści zewnętrznych.

Przeciwwskazania do wykonania badania: aktualnie trwające krwawienie miesięczne, zastosowanie kwasu mlekowego lub octowego (po kolposkopii), aktualnie przyjmowana antybiotykoterapia i leczenie przeciwgrzybicze lub w ostatnich 2 tygodniach, chyba, że lekarz zadecyduje inaczej.

WYMAZY NALEŻY POBIERAĆ PRZY ZAŁOŻONYM WZIERNIKU W KOLEJNOŚCI (w zależności od zleconych badań):


I Wymaz na posiew mikrobiologiczny → II Wymaz na biocenozę → III Wymaz na badanie genetyczne STI → IV Pomiar pH

Nie używać żeli nawilżających, dopuszcza się zwilżenie wziernika fizjologicznym roztworem soli.

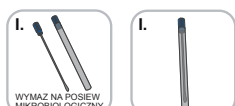


I. WYMAZ NA POSIEW MIKROBIOLOGICZNY – WYMAZ Z POCHWY

- Wyjąć wymazówkę z podłożem transportowym (**niebieska nasadka**) z opakowania ochronnego.
- Pobrać wymaz z tylnego sklepienia pochwy.
- Wymaz niezwłocznie umieścić w probówce z podłożem transportowym.
- Probówkę czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjentki oraz datą i godziną pobrania.

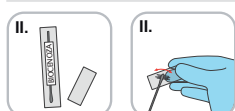

II. WYMAZ NA BIOCENOZĘ

- Za pomocą suchej wymazówki oznaczonej BIOCENOZA, pobrać wymaz z tylnego sklepienia pochwy.
- Wymaz rozprowadzić na szkiełku podstawowym z opisem BIOCENOZA.
- Poczekać do wyschnięcia wymazu.
- Szkiełko umieścić w plastikowym opakowaniu ochronnym i zamknąć.

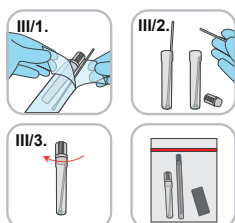

III. WYMAZ NA BADANIE PANELU UROGENITALNEGO 7 PATOGENÓW METODĄ PCR

UWAGA: W ciąży wymaz z kanału szyjki macicy pobiera wyłącznie lekarz ginekolog, po stwierdzeniu braku przeciwwskazań.

- Oczyszczyć ujście szyjki macicy sterylną gazą, usuwając nadmiar śluzu.
- Otworzyć opakowanie ochronne **Abbott Cervi-Collect Specimen Collection Kit** przez rozerwanie zgrzewu w dolnej części opakowania (rys. III/1.).
- Wprowadzić wymazówkę na głębokość 1-2 cm do kanału szyjki macicy i kilkakrotnie nią obrócić.
- Wyjąć wymazówkę nie dotykając ścian pochwy i przenieść do probówki z płynem. Dociskając wymazówkę do wewnętrznej ścianki probówki złamać ją, utamany trzonek odrzucić (rys. III/2.). Dopuszcza się usunięcie wymazówki z probówki po intensywnym jej wytrząśnięciu w płynie.
- Zakręcić probówkę z płynem i wymazówkę (rys. III/3.).

Probówki z pobranym materiałem oraz szkiełko z BIOCENOZĄ włożyć do worka na materiał biologiczny i szczelnie zakleić.

IV. POMIAR pH

Zmierzyć wartość pH w pochwie za pomocą załączonego papierka lakmusowego poprzez wprowadzenie papierka lakmusowego do pochwy. **Wartość pH należy zaznaczyć na skali, która znajduje się na karcie zlecenia wykonania badania.** Po zapisaniu wartości, papierkę lakmusową wyrzucić.

Zabezpieczony materiał umieścić wraz z uzupełnionym zleceniem w kartoniku zestawu pobraniowego i dostarczyć do nas wysyłkowo lub osobiście. W przypadku badań opłaconych bezpośrednio na konto bankowe Instytutu (z pominięciem sklepu internetowego) dołączyć również potwierdzenie płatności.



Maksymalny czas dostarczenia materiału do badania od momentu pobrania wynosi **48 h**.

Jeżeli jednocześnie wykonujesz kilka badań, pamiętaj o zachowaniu najkrótszego czasu dostarczenia materiału. Wszystkie badania, które chcesz wykonać, zaznacz na zleceniu.

Jeśli dostarczasz materiał za pośrednictwem Oddziału Instytutu w Warszawie lub placówki partnerskiej, zadбай o to, by dotarł on tam na początku tygodnia, maksymalnie w ciągu 24h od pobrania.



Od pobrania do czasu transportu przechowuj materiał w warunkach chłodniczych (2-8°C). Dla materiałów biologicznych wymagających chłodzenia również podczas transportu dostarczamy wkłady chłodzące. W takich przypadkach próbkę podczas transportu należy zabezpieczyć z wykorzystaniem dostarczonych wkładów chłodzących, uprzednio schłodzonych w zamrażarce przez minimum 6 godzin. Zadбай o to, by wkłady chłodzące nie dotykały bezpośrednio woreczka z pojemnikiem z materiałem. W tym celu użyj dostarczonej folii termoizolacyjnej owijając nią woreczek z próbką. Na dno kartonika włóż 1 wkład chłodzący, następnie próbkę zabezpieczoną folią i kolejny wkład chłodzący.

Przesłanie materiału

Wyślij przesyłkę z materiałem na początku tygodnia (poniedziałek-środa) na adres:

Instytut Mikrobiologii
Ul. Sielska 6
60-129 Poznań

Opłaciłaś/-eś pakiet z odbiorem Twojego materiału przez kuriera przeszkolonego w transporcie materiałów biologicznych?

Sprawdź dołączoną do Twojego zestawu instrukcję przygotowania próbki do wysyłki oraz zamówienia kuriera.

Zleciendodawcy/pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie etapy pobrania i transportu materiału biologicznego, do momentu dostarczenia do Instytutu Mikrobiologii. Opakowanie materiału jest zgodne z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz instrukcją pakowania P650.

Instrukcja pakowania i wysyłki materiału biologicznego dla pacjenta Instytutu Mikrobiologii znajduje się pod adresem
<https://instytut-mikroekologii.pl/instrukcja-pakowania-i-wysylki-materiału-biologicznego/>



Instytut Mikrobiologii
Wrażliwi na Twoje wnętrze

ul. Sielska 10, 60-129 Poznań ■ tel.: 61 862 63 15 ■ tel. kom.: 538 325 843
biuro@instytut-mikroekologii.pl ■ laboratorium@instytut-mikroekologii.pl

www.instytut-mikroekologii.pl

