


INSTRUKCJA POBRANIA I PRZESŁANIA MATERIAŁU DO BADANIA – M2-PK + krew utajona

UWAGA! Zestaw do badania należy wykorzystać do terminu ważności podanego na próbówce do badania na krew utajoną. W przypadku niewykorzystania zestawu – badanie ulega przeterminowaniu, a koszt nie podlega zwrotowi.

Pobranie materiału




Przygotuj zestaw pobraniowy Instytutu Mikrobiologii. Będą Ci potrzebne: kałówka i kałotłapacz (papierowy przyłepiec na deskę), które są dołączone do zestawu. Kałotłapacz przymocuj do deski sedesowej i rozciągnij nad toaletą (możesz też użyć folii streczkowej). Na tak zabezpieczoną toaletę, wypróżnij się w standardowy sposób. Zadbaj jedynie o to, by pobierany kał nie miał styczności z moczem ani toaletą. Wyjąć z opakowania 2 próbówki z nakłuwaczami oraz osobny pojemnik na kał.

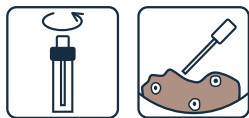

Pobranie kału do badania M2-PK – próbówka M2-PK Quick-Prep z białym nakłuwaczem (biały patyczek z wyżłobieniami) i niebieską nasadką odbierającą.

1. Przytrzymując próbówkę z niebieską nasadką, okrężnym ruchem wyciągnąć biały nakłuwacz (biały patyczek z wyżłobieniami) do pobierania próbki kału (niebieska nasadka musi pozostać na próbówce).
2. Pobrać kał poprzez 3-krotne wklucie nakłuwacza na głębokość 1 cm w próbkę kału, tak by wszystkie rowki nakłuwacza były wypełnione kałem. **WAŻNE!**
3. Umieścić wypełniony kałem nakłuwacz w próbówce, tak by końcówka przeszła przez niebieską nasadkę (usunięcie nadmiaru kału). Zamknąć próbówkę dociskając ruchem okrężnym nakłuwacz z pobranym materiałem.

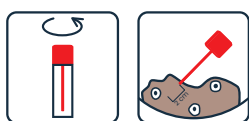

Pobieranie kału do badania na krew utajoną – próbówka z czerwonym nakłuwaczem.

1. Ustawić pionowo próbówkę czerwonym nakłuwaczem do góry (czerwony patyczek z wyżłobieniami).
2. Odkręcić czerwoną końcówkę i wyciągnąć z próbówki czerwony nakłuwacz. Nie dopuścić do wylania płynu z próbówki.
3. Pobrać kał poprzez 3-krotne wklucie nakłuwacza na głębokość 2 cm w próbkę kału, tak by wszystkie rowki nakłuwacza były wypełnione kałem. **WAŻNE!**
4. Umieścić nakłuwacz z kałem z powrotem w próbówce i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu szczelnego zamknięcia próbówki.

Pobranie zapasowej próbki kału – poza nakłuciem kału dodatkowo wymaga się pobrania osobno próbki kału wielkości orzecha włoskiego do 15 ml próbówki.



Zabezpieczony materiał umieścić wraz z uzupełnionym zleceniem w kartoniku zestawu pobraniowego i dostarczyć do nas wysyłkowo lub osobiście. W przypadku badań opłaconych bezpośrednio na konto bankowe Instytutu (z pominięciem sklepu internetowego) dołączyć również potwierdzenie płatności.



Maksymalny czas dostarczenia materiału do laboratorium Instytutu Mikrobiologii w Poznaniu przy ul. Sielskiej 6 od pobrania wynosi **48 h**.

Jeżeli jednocześnie wykonujesz kilka badań, pamiętaj o zachowaniu najkrótszego czasu dostarczenia materiału. Wszystkie badania, które chcesz wykonać, zaznacz na zleceniu.

Jeśli dostarczasz materiał za pośrednictwem Oddziału Instytutu w Warszawie lub placówki partnerskiej, zadbaj o to, by dotarł on tam na początku tygodnia, maksymalnie w ciągu 24h od pobrania.



Od pobrania do czasu transportu przechowuj materiał w warunkach chłodniczych (2–8°C). Dla materiałów biologicznych wymagających chłodzenia również podczas transportu dostarczamy wkłady chłodzące. W takich przypadkach próbkę podczas transportu należy zabezpieczyć z wykorzystaniem dostarczonych wkładów chłodzących, uprzednio schłodzonych w zamrażarce przez minimum 6 godzin. Zadbaj o to, by wkłady chłodzące nie dotykały bezpośrednio woreczka z pojemnikiem z materiałem. W tym celu użyj dostarczonej folii termoizolacyjnej owijając nią woreczek z próbką. Na dno kartonika włóż 1 wkład chłodzący, następnie próbkę zabezpieczoną folią i kolejny wkład chłodzący.

Przesłanie materiału

Wyślij przesyłkę z materiałem na początku tygodnia (poniedziałek–środa) na adres:

Instytut Mikrobiologii
Ul. Sielska 6
60-129 Poznań

Opłaciłeś/-eś pakiet z odbiorem Twojego materiału przez kuriera przeszkolonego w transporcie materiałów biologicznych?

Sprawdź dołączoną do Twojego zestawu instrukcję przygotowania próbki do wysyłki oraz zamówienia kuriera.

Zleceniodawcy/pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie etapy pobrania i transportu materiału biologicznego, do momentu dostarczenia do Instytutu Mikrobiologii. Opakowanie materiału jest zgodne z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz instrukcją pakowania P650. **Instrukcja pakowania i wysyłki materiału biologicznego dla pacjenta Instytutu Mikrobiologii znajduje się pod adresem** <https://instytut-mikrobiologii.pl/instrukcja-pakowania-i-wysylki-materialu-biologicznego/>



Instytut Mikrobiologii
Wrażliwi na Twoje wnętrze

ul. Sielska 10, 60-129 Poznań ■ tel.: 61 862 63 15 ■ tel. kom.: 538 325 843
biuro@instytut-mikrobiologii.pl ■ laboratorium@instytut-mikrobiologii.pl

www.instytut-mikrobiologii.pl

